

ADAPTIC*

wilgotny opatrunek nieprzywierający



Nie przywiera i chroni

ADAPTIC* jest sterylnym opatrunkiem z dzianiny wiskozowej impregnowanej specjalną emulsją oleisto-wodną. Jest zewnętrznym opatrunkiem kontaktowym o działaniu nawilżająco-nattuszczającym i zapobiega przywieraniu do powierzchni rany.


ADAPTIC* - odpowiedni opatrunek dla każdej rany wymagającej wilgotnego środowiska i drenażu wydzieliny

Charakterystyka ADAPTIC*


Włókna wiskozowe - w przeciwieństwie do bawełny - charakteryzują się gładkością, mają jednolitą powierzchnię co bezpośrednio zapobiega przywieraniu opatrunku do rany. Odpowiednia wielkość oczek w dzianinie 1x1 mm zapobiega wrastaniu tkanki w opatrunek, a jego trójwymiarowa struktura ogranicza kontakt opatrunku z raną do minimum, jednocześnie umożliwiając odpływ wydzieliny do warstwy opatrunku absorpcyjnego.

ADAPTIC* może być przycinany do rozmiaru rany bez strzępiania się, w przeciwieństwie do tradycyjnego opatrunku gazowego

ADAPTIC*

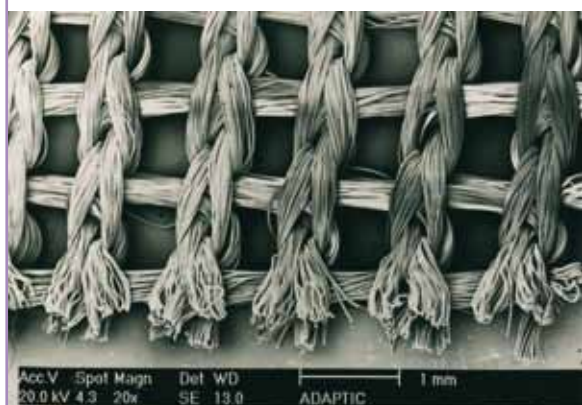

Gaza bawełniana

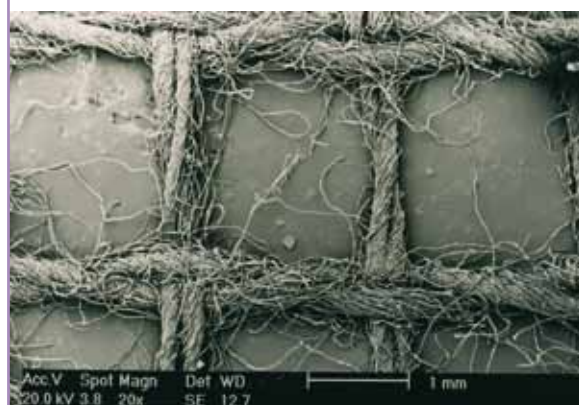

Specjalna neutralna emulsja (bez środków aktywnych) powoduje nawilżanie i natuszczanie pokrywanego miejsca, jednocześnie nie blokując odpływu wydzieliny z rany. Opatrunek nie powoduje reakcji alergicznych.

Zastosowanie ADAPTIC*

- oparzenia;
- rany popromienne;
- rany pooperacyjne;
- miejsca pobrania i nakładania przeszczepów;
- owrzodzenia;
- zmiany dermatologiczne.



Aplikacja ADAPTIC*

- przemyć ranę jałowym roztworem soli fizjologicznej lub postępować z obowiązującymi standardami;
- nakładać opatrunek bezpośrednio na ranę dopasowując jego wielkość do rozmiaru rany;
- zastosować opatrunek wtórny (chłonny);
- przy zainfekowanych ranach pokryć ADAPTIC* opatrunkiem ACTISORB* Silver 220 i całość zabezpieczyć opatrunkiem chłonny.

Kod produktu	Rozmiar	Ilość w op. handlowym
2012	7,6 x 7,6 cm	50 szt.
2014	7,6 x 40,6 cm	36 szt.
2015	7,6 x 20,3 cm	24 szt.
2019	12,7 x 22,8 cm	12 szt.



Producent:

Systagenix Wound Management Ltd
Gargrave, North Yorkshire, BD23 3RX

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

Systamed - D. Kusiak i P. Zawirski Sp. J.
ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź
tel./ fax +48 42 685 52 80, e-mail: biuro@systamed.pl
WWW: systamed.pl